


Faça a Escolha *Inteligente*

Além de tudo isso, você pode ter:

Visibilidade e acesso aos seus dados com a tecnologia ASP ACCESS®.



Aplicativo baseado na Web ASP ACCESS® Technology (Vista do Painel)

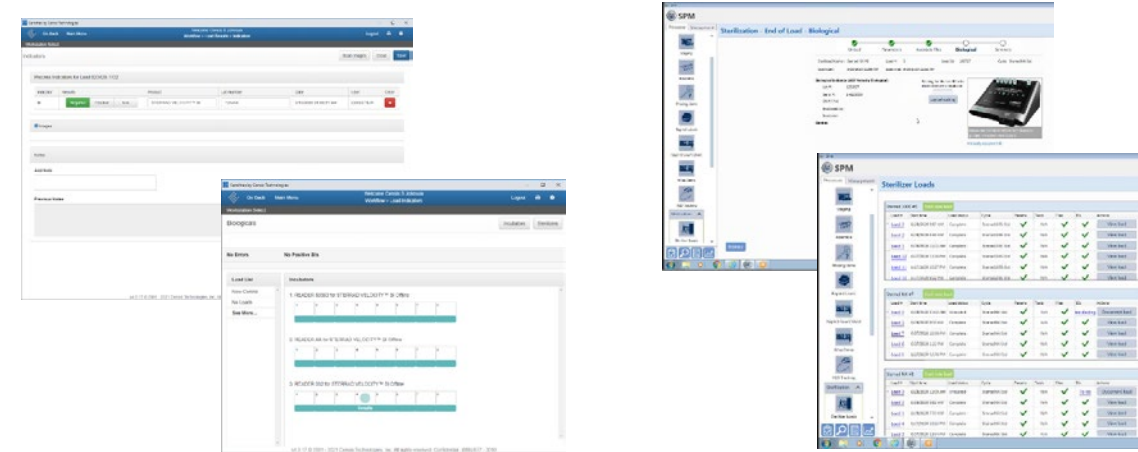

A Tecnologia ASP ACCESS® é compatível com Instrument Tracking Systems (ITS)

Informação Importante: Antes de usar, consulte as Instruções de Uso completas fornecidas com o dispositivo(s), para obter o uso, indicações, contraindicações, advertências e precauções adequados.

Os nomes de produtos em maiúsculas são marcas comerciais da ASP Global Manufacturing, GmbH
As marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Av. Tamboré, 1077 - Parte A - Tamboré, Barueri, SP. CEP: 06460-000. Responsável técnico: Dra. Patricia Ellen Nakano - CRF-SP 23230. (Leitora Sterrad Velocity™ 15 minutos e Indicador Biológico Velocity™ 15 minutos - ISENTO DE REGISTRO). Elaborado em: 09/2021 - BRMRASP 3950 - versão 1 - 2012. ©ASP 2021. All rights reserved. Os produtos comercializados e marcas registradas são propriedade da ASP Global Manufacturing, GmbH



Protecting patients during their most critical moments.™



33 Technology Drive, Irvine, CA 92618
© ASP 2021. All Rights Reserved.
AP-2000651-2

STERRAD VELOCITY™

Indicador Biológico (IB)/Pacote Teste Desafio (PCD)

Faça a Escolha *Inteligente*

O único sistema de IB inteligente e rápido o suficiente para aumentar a conformidade e reduzir os erros do operador.


O primeiro e único "2 em 1"



Pronto para Auditoria - Conformidade com AAMI
- Processamento Simplificado

Simplicidade

Desenvolvida desde o início para ser simples de usar, a Leitora STERRAD VELOCITY® 15 minutos fornece instruções passo a passo diretamente na tela para ajudar a garantir que cada Indicador Biológico seja processado rapidamente e em conformidade.

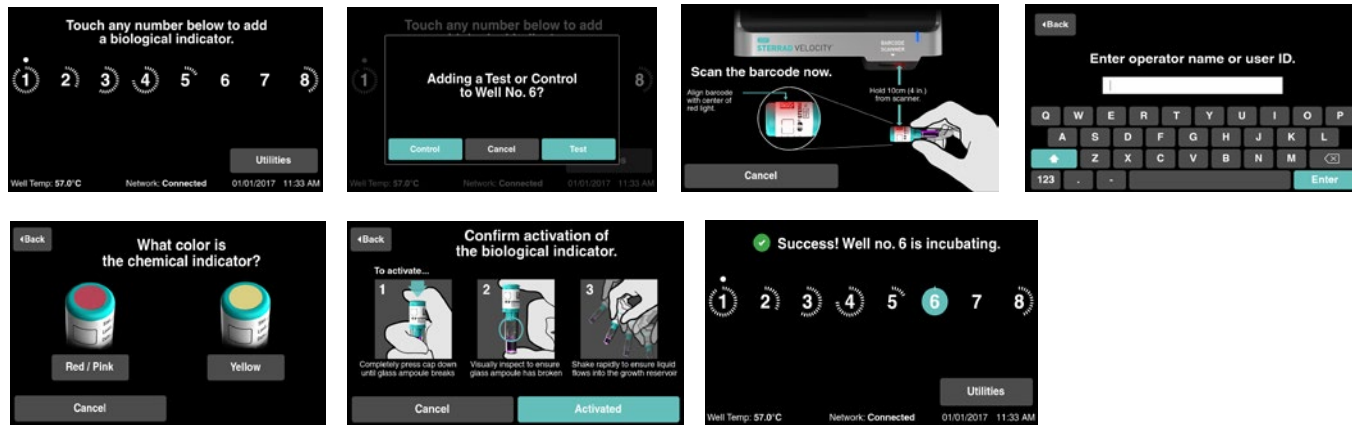

Instruções passo a passo facilitam o treinamento de novos funcionários com Instruções de Uso (IFU) de ponto de uso incorporadas

Os Indicadores Biológicos de teste positivos são RUINS. Mas os Indicadores Biológicos de controle positivo são BONS. Então, por que algumas leitoras os tratam da mesma forma?

A Leitora STERRAD VELOCITY® 15 minutos é inteligente o suficiente para saber a diferença e só alertará sua equipe quando necessário.



O Sistema STERRAD VELOCITY® 15 minutos alerta o usuário apenas quando é necessária atenção.

Conformidade Automatizada

Alertas e instruções quando você precisar.

Fique tranquilo sabendo que a leitora STERRAD VELOCITY® 15 minutos está lhe dando suporte

As proteções integradas impedem automaticamente o uso de Indicadores Biológicos:

- expirados
- que são ativados indevidamente
- de cargas canceladas
- que já foram incubados
- que ultrapassaram o tempo limite máximo entre a conclusão do ciclo e a incubação (2 horas)

Além disso, a leitora incorpora a IFU de ponto de uso:

- Exija que os usuários processem um IB de controle positivo de acordo com as Instruções de Uso (IFU) (a cada 24 horas)
- Verifique se a alteração de cor do Indicador Químico está correta
- Comunique-se com os esterilizadores STERRAD®* para reconciliar automaticamente os registros do IB e ciclo

*Os recursos requerem conectividade com a Tecnologia ASP ACCESS®

O único IB/PCD completo liberado pelo FDA e que atende às diretrizes recomendadas pela AAMI.



AORN 2020 eGuidelines for Perioperative Practice: Sterilization
Section 10.10.2
 “Realize o monitoramento de eficácia de rotina para o esterilizador todos os dias em que o esterilizador é usado para cada tipo de ciclo (por exemplo, padrão, avançado, lúmen, não lúmen), de preferência com cada carga. Use o produto de monitoramento de qualidade contendo IB, de acordo com as Instruções de Uso (IFU) do fabricante do IB.”



ANSI/AAMI ST58 2013 (R)/2018
9.5.4.3 Frequência de uso de indicadores biológicos e pacotes teste desafio
 “Um PCD com o IB apropriado também deve ser usado pelo menos diariamente, mas de preferência em todos os ciclos de esterilização...”

The third-party trademarks used herein are the properties of their respective owners.



Vermelho = RUIM
 (Controle Negativo, Teste Positivo)



Amarelo = PRECISA DE ATENÇÃO



Verde = BOM
 (Controle Positivo, Teste Negativo)




- Combinação IB/PCD em um produto
- Minimiza falsos positivos e reduz o custo de processamento
- Não necessita de pacote de teste
- Não necessita de embalagens Tyvek®



Eficiência

15 minutos desde a digitalização do IB até resultados impressos e totalmente documentados.*

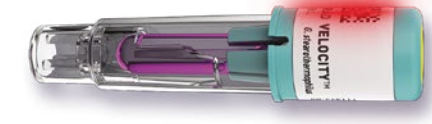

STERRAD VELOCITY®

Well No. 3:
 Negative Test Result Summary

BI Lot #	Biological Indicator Type: Test Lot Number: 0101804 Serial Number: 1-1458787 Expiration Date: 10/10/2018 Added By: JDE Time Added: 11:44:22 Date: 04/25/2018 Chemical Indicator Color Change: Yes Temperature: 57.0°C Result: Negative Result Time: 12:14:43	BI Expiration Date # Time In Chemical Indicator Result BI Result
Incubator Temp		
BI Control Info	Corresponding Control Biological Indicator Info Date: 04/25/2018 Lot Number: 0101804 Serial Number: 1-1453078 Result: Positive Result Time: 00:35:40	Control BI Result
STERRAD Cycle Info	STERRAD® Sterilizer Cycle Info STERRAD® Sterilizer ID: ST100N1043160071 Cycle Type: FLEX Cycle Number: 4 Cycle Start Time: 10:31:00 Cycle End Time: 11:10:00 Cycle End Date: 04/25/2018 Cycle Status: ---	
STERRAD VELOCITY® Reader Info Serial Number: 4317113029 Software Version: 1139260208		
Notes N/A		

● = AAMI ST58 Section 9.5.4.5.2
 ● = AAMI ST58 9.5.3.2

*15 minutos ou 30 minutos dependendo da versão do software. Consulte as Instruções de Uso (IFU) para obter os resultados reais.